

IA-300

イオン分析計

誰でも簡単に多項目のイオンを同時測定



IA-300
Ion analyzer

イオン分析を より簡単により身近に！

イオン分析計は、イオンクロマトグラフ法を測定原理とした測定器です。

イオンクロマトグラフ法はJISなど多くの公定法に採用されている信頼性の高い測定方法です。

環境測定はもちろん、原料から生産ライン・品質検査・排水測定などさまざまな分野で
ご使用いただいています。

もっと身近なところで使っていただくために… それがイオン分析計です。

イオン分析計は、

イオンクロマトの機能（ポンプ部・試料注入部・恒温部・検出部・データ処理部・プリンタ部など）を
ワンパッケージング、試料を装置に注入するだけで、目的イオンの濃度を知ることができます。


こんなイオンが
測定対象です。

陰イオン F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_4^{2-} を同時に測定

陽イオン Li^+ 、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} を同時に測定

（ご注意：陰イオンと陽イオンの同時測定はできません）

装置の構成

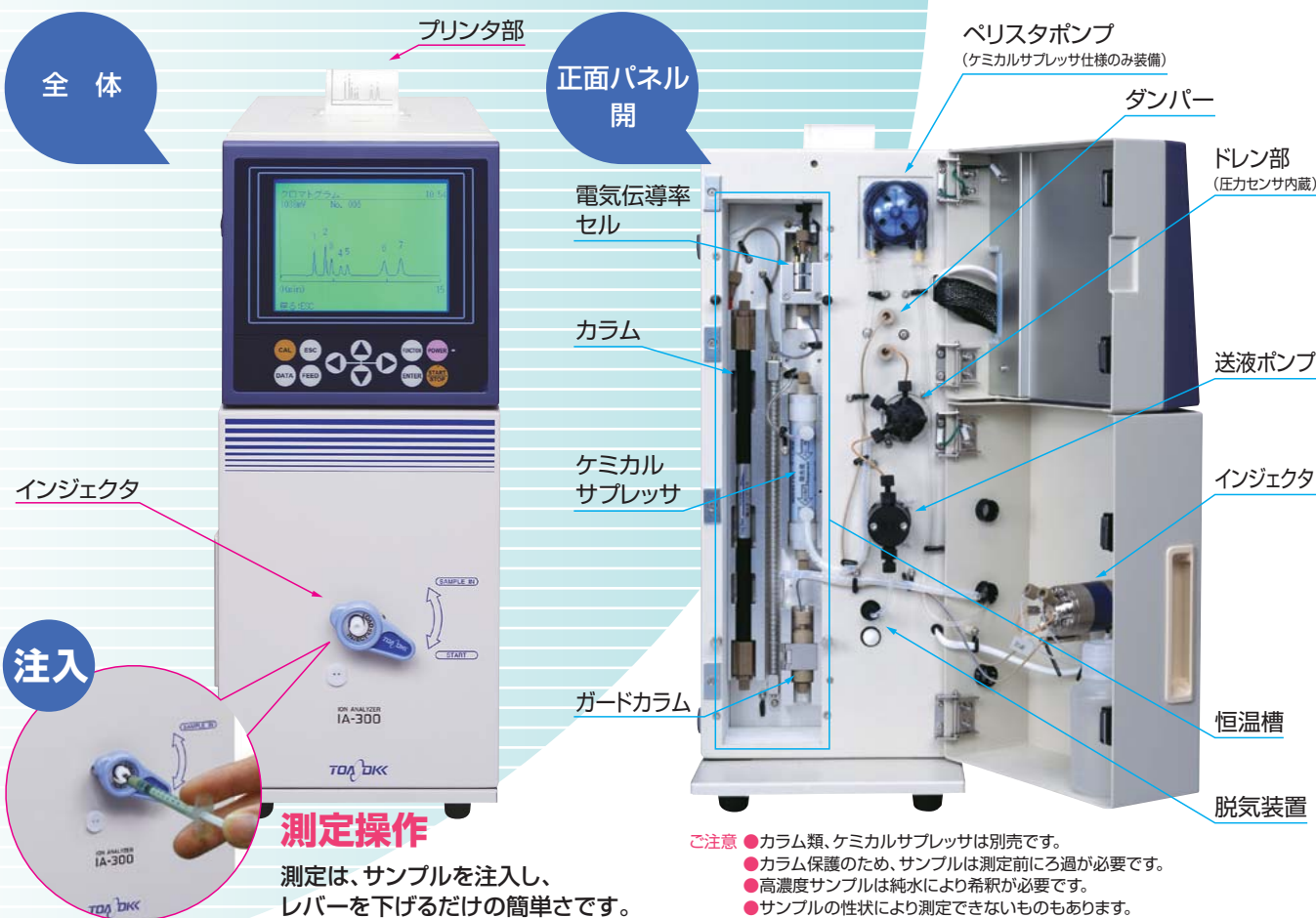

特長

モード選択で測定条件を設定

イオンクロマトグラフ法の採用で、陽イオン6項目または陰イオン7項目が測定できます。
また、測定モードの選択により、1価陽イオンのみ、2価陽イオンのみの測定もできます。
さらに、従来のイオン分析計*で使用していた測定モードもすべて対応しております。 ※IA-100/200

測定モード	測定イオン
1、2価 陽イオン同時測定モード	リチウムイオン、ナトリウムイオン、アンモニウムイオン、カリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン
1価 陽イオン測定モード	リチウムイオン、ナトリウムイオン、アンモニウムイオン、カリウムイオン
2価 陽イオン測定モード	マグネシウムイオン、カルシウムイオン
陰イオン測定モード	ふっ化物イオン、塩化物イオン、亜硝酸イオン、臭化物イオン、硝酸イオン、りん酸イオン、硫酸イオン

簡単な測定操作、 結果は装置内部で自動解析・演算

測定は、サンプル注入するだけの簡単操作です。
また、自動データ処理機能の内蔵により、従来、イオンクロマトグラフでパソコンなどにより行っていたデータの処理（解析）操作を、装置自体が自動解析・演算を行います。
データ処理に費やす時間を格段に短縮しました。

測定結果は 表示部に表示・プリンタ部で印字 硬度・窒素量への換算も可能(測定例参照)

陰イオン測定にサプレッサ法も採用

従来の測定条件に加え、イオン交換膜サプレッサを使った陰イオン測定モードを追加しました。りん酸イオンの測定精度の向上と、各イオンの測定範囲が広がります。（仕様参照）

省力化システムへの対応可能

オートサンプラ（別売）接続により多検体自動測定に対応。

〈応用例〉


イオン分析計2台とオートサンプラ（2ch仕様）による
陰陽イオン同時測定システム 等

測定に必要な各種試薬類を用意(別売)


各種試薬類を用意していますので、試薬調製に必要となる超純水・天秤などの特別な設備がなくても、測定モードに合わせて選択すればすぐにご使用いただけます。

メンテナンスも容易

カラムの交換や配管などはすべて前面で操作できるため、メンテナンスが容易です。
また、メンテナンスモードの採用により、保守やトラブルシューティングについて画面上で操作案内をするので大変分かりやすくなっています。

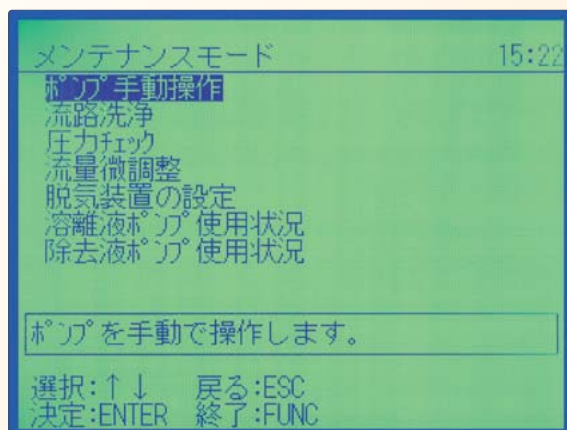

メンテナンスモードメニュー表示例

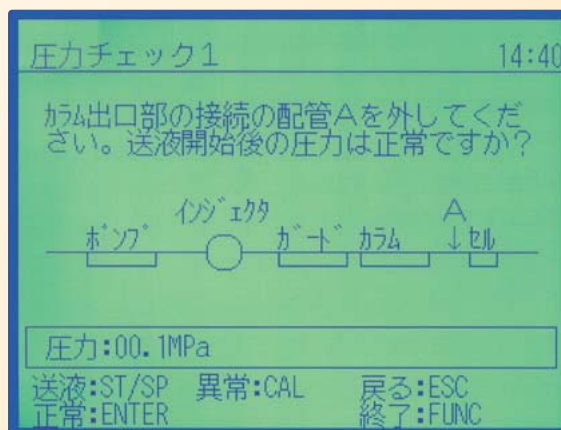

圧力チェックモード表示例

いろいろな便利機能


簡便な溶離液の導入操作

インライン脱気装置を含めて
3mL以下の
低デッドボリュームです。


コックを反時計回りにゆるめ、
付属のシリンジで
呼び水が行えます。



溶離液の置換も
速やかに行えます。

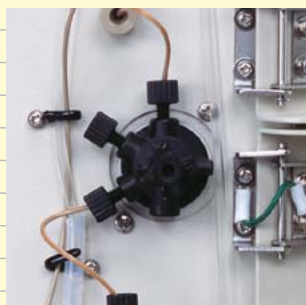

配管をはずすことなく
操作できます。

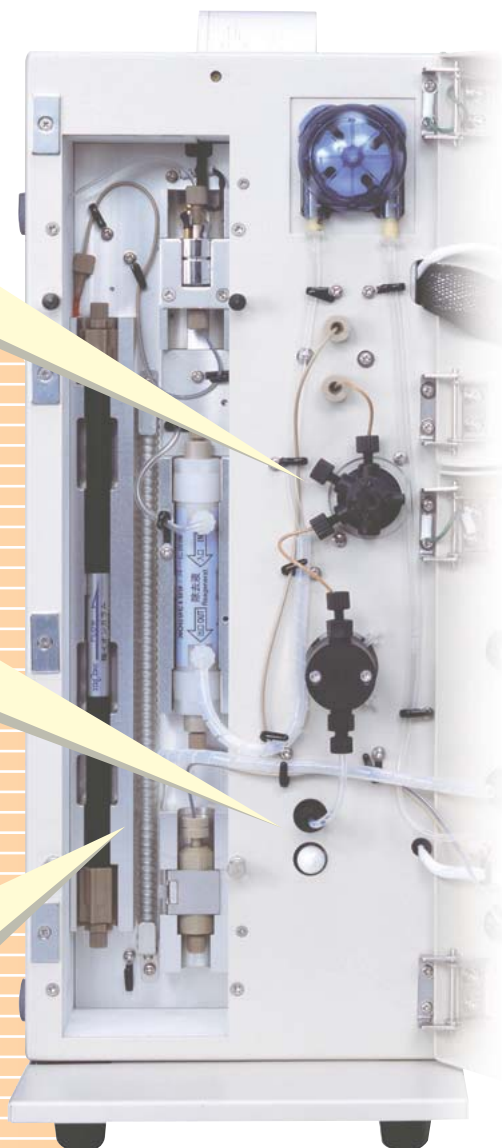

大型恒温部の採用



カラム、ガードカラム、
サプレッサ、検出セル、
すべてを恒温部に収納しました。

装置起動後は、
圧力/電気伝導率値も
表示します。

測定できます	15:21
測定モード	1. 2面場付 FCI-322
注入量	20μL
サンプル名	9
流速	1
圧力	-0015mV k:246mS/m
電気伝導率	03.8mPa
校正	03/13 12:58 校正済み
停止:ST/SP	設定:FUNC
校正:CAL	データ:DATA
	オート:ENT

装置状態を
より具体的にお知らせします。

測定の安定化、
信頼性を向上します。

さまざまな取扱いを 想定したタイマー機能

曜日ごとに装置起動・停止の時刻設定を
可能にしました。

タイマーの設定		3/15 水	15:21
月	自動起動時刻	OFF	17:00
火	OFF	08:00	OFF 17:00
水	ON	08:00	ON 17:00
木	OFF	08:00	OFF 17:00
金	OFF	08:00	OFF 19:00
土	OFF	08:00	OFF 17:00
日	OFF	08:00	OFF 17:00
ON/OFF/毎週を選択してください。			
変更: ↑ ↓	移動: ← →	戻る: ESC	
決定: ENTER	同一: CAL	終了: FUNC	

待たずにすぐ測定


充実した印字機能

用紙セット部にチャート紙を差し込むと、自動で給紙されます。




チャート紙が無くなると、
表示部のメッセージでお知らせします

チャート紙が無くなると、
表示部のメッセージでお知らせします

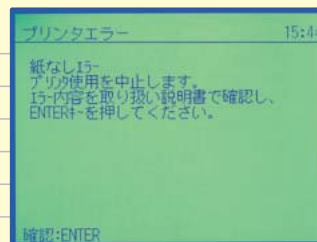


チャート紙補充のメッセージを
表示します。

自動給紙され
セッティング完了です。

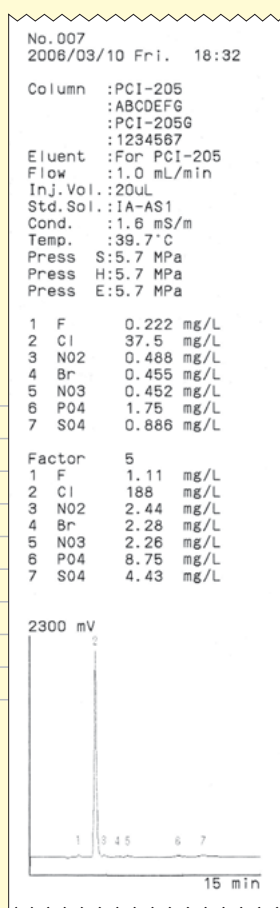

印字の有無を選択できます。

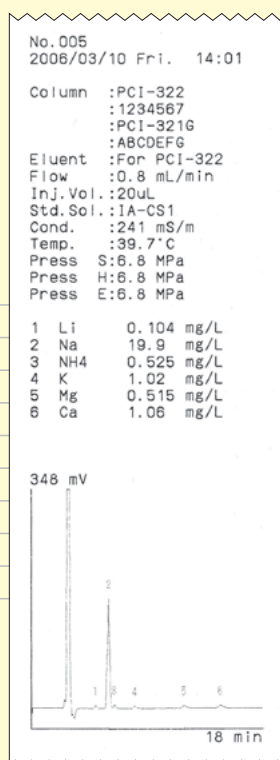

クロマトグラムは
指定した表示スケールで
印字させることが
できます。

低濃度に合わせて印字できます。

オプションとの組み合わせで、さらに便利（周辺装置／別売品参照）

オートサンプラ ICA-200ASとの
組み合わせで自動測定を充実しました。

さまざまな自動測定に対応

イオン分析計 IA-300専用の
レポート作成ソフトを充実しました。

日報、月報などデータ整理に便利です。

表示・印字


定量値とクロマトグラムを表示、印字できます。

陰イオン校正データ

校正データ表示例

校正値			15:35
校正年月日: 2006/03/10 17:59			
測定土: 降付 PCI-205			
ピーク	成分名	RT (min)	面積
1	F	3.23	35564.8
2	Cl	4.27	50670.6
3	NO2	4.86	30844.6
4	Br	5.71	19537.7
5	NO3	6.31	24933.4
6	PO4	9.80	55947.0
7	SO4	11.33	67259.6
判定:→			戻る:ESC
印字:ENTER			

クロマトグラム

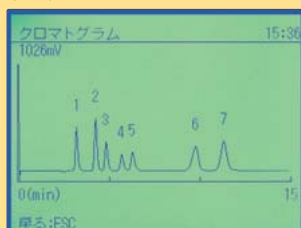

陽イオン測定データ

測定データ表示例

測定データ		15:39	
No. 008	2006/03/13 13:19		
希釈率: 2			
ピーク成分名	測定値	換算値	
1	Li	2.01 mg/L	4.02 mg/L
2	Na	10.0 mg/L	20.0 mg/L
3	NH4	10.0 mg/L	20.0 mg/L
4	K	20.0 mg/L	40.0 mg/L
5	Mg	10.1 mg/L	20.2 mg/L
6	Ca	20.2 mg/L	40.4 mg/L
選択: ↑ ↓	20.2 →	戻る: ESC	
変更: *	印字: ENTER	終了: DATA	

クロマトグラム



印字例

校正結果の印字例です。


校正結果についてはプリンタの設定によらず無条件で印字されます。

TOA BKK
DKK-TOA CORPORATION
ION ANALYZER IA-300
Version 0.0
Serial No. : 538491
2006/03/13 Mon. 12:59

2006/03/10 Fri. 17:59
Column : PCI-205
: ABCDEFG
: PCI-2056
: 1234567
Eluent : For PCI-205
Flow : 1.0 mL/min
Inj. Vol. : 20uL
Std. Sol. : IA-AS1
Plate : 5594 (S04)
Rs : 2.3 (Cl-NO2)
Cond. : 1.6 mS/m
Temp. : 39.7°C
Press S: 5.7 MPa
Press H: 5.7 MPa
Press E: 5.7 MPa

	RT	Area
1 F	3.23	35564.8
2 Cl	4.27	50670.6
3 NO2	4.86	30844.6
4 Br	5.71	19537.7
5 NO3	6.31	24933.4
6 PO4	9.80	55947.0
7 SO4	11.33	67259.6

Calibration OK (1)

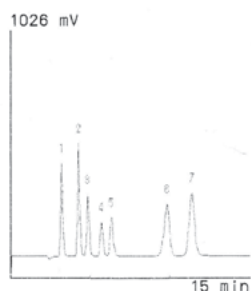


印字例

サンプル測定結果の印字例です。

No. 008
2006/03/13 Mon. 13:19

Column : PCI-322
: 1234567
: PCI-3216
: ABCDEFG
Eluent : For PCI-322
Flow : 0.8 mL/min
Inj. Vol. : 20uL
Std. Sol. : IA-CS1
Cond. : 242 mS/m
Temp. : 39.7°C
Press S: 6.7 MPa
Press H: 6.7 MPa
Press E: 6.7 MPa

1	Li	2.01	mg/L
2	Na	10.0	mg/L
3	NH4	10.0	mg/L
4	K	20.0	mg/L
5	Mg	10.1	mg/L
6	Ca	20.2	mg/L

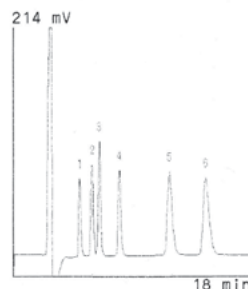


測定例

●窒素、りん、イオウ、硬度の換算印字例

■ 陰イオン


水道水

Factor	1
1 F	0.099 mg/L
2 Cl	16.0 mg/L
3 NO2	0.000 mg/L
4 Br	0.000 mg/L
5 NO3	9.00 mg/L
6 PO4	0.000 mg/L
7 SO4	30.8 mg/L

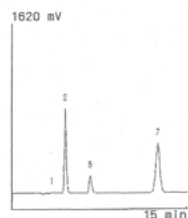

■ 陽イオン


Factor	1
1 Li	0.000 mg/L
2 Na	9.55 mg/L
3 NH4-N	0.000 mg/L
4 K	2.39 mg/L
5 Mg	4.48 mg/L
6 Ca	23.0 mg/L

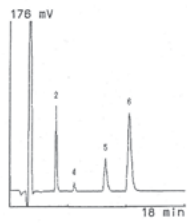

■ 陰イオン


液肥

Factor	1000
1 F	0.000 mg/L
2 Cl	16.0 mg/L
3 NO2-N	0.000 mg/L
4 Br	0.000 mg/L
5 NO3-N	1.20 g/L
6 PO4-P	4.44 g/L
7 SO4-S	79.0 mg/L

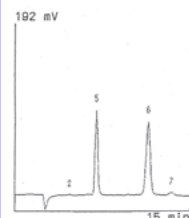

■ 陽イオン


Factor	10000
1 Li	0.000 mg/L
2 Na	2.17 g/L
3 NH4-N	33.1 g/L
4 K	50.3 g/L
5 Mg	0.000 mg/L
6 Ca	0.000 mg/L
GH	0.000 mg/L

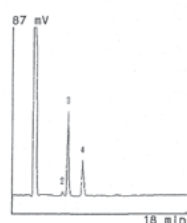

■ 陰イオン


雨水

Factor	1
1 F	0.000 mg/L
2 Cl	0.480 mg/L
3 NO2	0.018 mg/L
4 Br	0.000 mg/L
5 NO3	3.11 mg/L
6 PO4	0.000 mg/L
7 SO4	2.17 mg/L

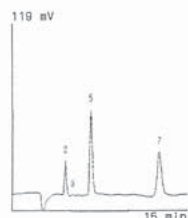

■ 陽イオン


Factor	1
1 Li	0.000 mg/L
2 Na	0.330 mg/L
3 NH4	0.994 mg/L
4 K	0.339 mg/L
5 Mg	0.052 mg/L
6 Ca	0.935 mg/L
GH	2.55 mg/L

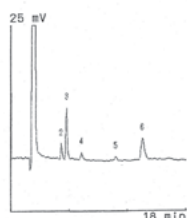

■ 陰イオン


排水

Factor	5
1 F	0.085 mg/L
2 Cl	42.6 mg/L
3 NO2-N	0.000 mg/L
4 Br	0.000 mg/L
5 NO3-N	16.3 mg/L
6 PO4	1.86 mg/L
7 SO4	31.3 mg/L

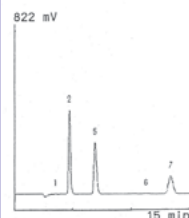

■ 陽イオン

Factor	1
1 Li	0.000 mg/L
2 Na	45.6 mg/L
3 NH4-N	0.078 mg/L
4 K	10.8 mg/L
5 Mg	5.79 mg/L
6 Ca	25.5 mg/L
GH	87.4 mg/L

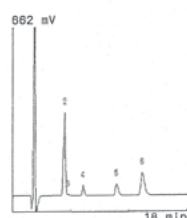


●3種類の硬度印字例

■ 陽イオン

ミネラル水 国内


Factor	1
1 Li	0.000 mg/L
2 Na	4.42 mg/L
3 NH4	0.000 mg/L
4 K	0.531 mg/L
5 Mg-hd	8.33 mg/L
6 Ca-hd	17.0 mg/L
GH	25.4 mg/L

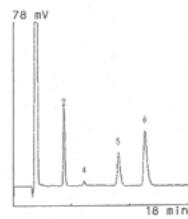

■ 陽イオン

ミネラル水 国外


Factor	2
1 Li	0.176 mg/L
2 Na	76.4 mg/L
3 NH4	0.000 mg/L
4 K	7.54 mg/L
5 Mg-hd	120 mg/L
6 Ca-hd	408 mg/L
GH	528 mg/L

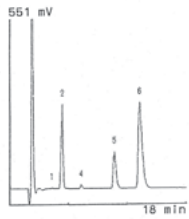

■ 陽イオン

市販飲料(深層水)

Factor	1
1 Li	0.000 mg/L
2 Na	18.1 mg/L
3 NH4	0.000 mg/L
4 K	15.2 mg/L
5 Mg-hd	208 mg/L
6 Ca-hd	46.9 mg/L
GH	255 mg/L

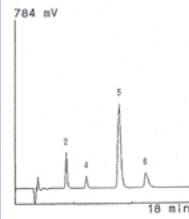


●総硬度のみの印字例

■ 陽イオン

ビール


Factor	5
1 Li	0.480 mg/L
2 Na	23.7 mg/L
3 NH4	14.6 mg/L
4 K	259 mg/L
5 Mg	68.5 mg/L
6 Ca	38.8 mg/L
GH	381 mg/L

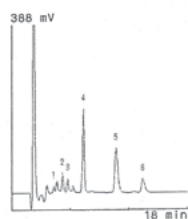

■ 陽イオン

発泡酒

Factor	5
1 Li	0.000 mg/L
2 Na	24.8 mg/L
3 NH4	0.820 mg/L
4 K	156 mg/L
5 Mg	36.7 mg/L
6 Ca	34.6 mg/L
GH	238 mg/L

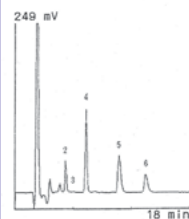


●その他

■ 陰イオン


湧水

Factor	1
1 F	0.087 mg/L
2 Cl	9.34 mg/L
3 NO2	0.000 mg/L
4 Br	0.000 mg/L
5 NO3	6.24 mg/L
6 PO4	0.000 mg/L
7 SO4	69.6 mg/L

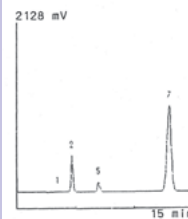

■ 陽イオン

Factor	1
1 Li	0.000 mg/L
2 Na	7.89 mg/L
3 NH4	0.000 mg/L
4 K	1.05 mg/L
5 Mg	10.2 mg/L
6 Ca	51.0 mg/L

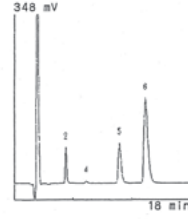

周辺装置／別売品

多検体自動測定による省力化を実現。

オートサンプラ ICA-200AS

¥1,400,000 (1ch仕様) / ¥1,800,000 (2ch仕様)

多検体自動測定、
陰イオン・陽イオン同時測定、
自動希釈などに対応します。
また、IA-300のタイマー機能と連動した
自動起動、自動校正、自動測定、
自動停止までの
完全無人測定にも対応します。
(サンプルをセットするのみでOK)

〈特許出願中〉

■ 特長

1台で最大2台のIA-300を接続可能 (2ch仕様)

シリンジユニットやバルブユニットの増設により、
IA-300を2台まで接続できます。
陽イオンおよび陰イオンの同時分析が可能です。

最大80検体の自動測定が可能

サンプルラックに試料溶液をセットするだけで、最大
80検体の連続自動測定が可能です。
タイマー機能と連動すれば、完全無人測定を行うこ
とが可能です。

測定検体の自動希釈可能 (最大40検体)

検体を自動希釈して測定することが可能です。希釈倍
率は10~200倍 (10倍ステップ) を設定できます。
自動校正機能を設定すれば、標準液は希釈せずサ
ンプルのみ希釈し測定を行うことが可能です。

連続測定中の不測事故にも対応

連続測定動作中に、動作エラー等が発生した場合
は測定済み番号を記憶して連続測定動作を停止し
ます。

エラー解消後、未測定番号から測定を再開します。
また、指定した番号から測定を行うことも可能です。

オートサンプラ用接続ケーブル

118B412

¥20,000 [IA-300 1台 + ICA-200AS (1ch) 1台]

118B413

¥25,000 [IA-300 2台 + ICA-200AS (2ch) 1台]


イオン分析計接続用の専用ケーブルです。

■仕様

型名	ICA-200AS
価格	1ch仕様:¥1,400,000 2ch仕様:¥1,800,000
表示	液晶表示器 40桁×4行 (バックライト付き)
検体数	通常80検体 (希釈モード使用時は最大40検体)
試料容器	2mL専用容器
試料注入量	1~150 μ L (1 μ Lステップ) 150 μ L以上はサンプルループ固定で最大250 μ L
試料注入方式	シリンジ吐出方式 (INJECT MODE) ループカット方式 (LOOP MODE)
注入量繰返し性	C.V.値0.5%以内 (20 μ L注入 室温25℃時)
試料の希釈	純水注入による自動希釈
希釈倍率	10~200倍 (10倍ステップ)
希釈精度	±5%以内 (100倍希釈 室温25℃時)
接液部材質	PEEK、フッ素樹脂、SUS (針部)
出力コネクタ	RS-232C 接点信号
使用温度範囲	5~35℃
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大約80VA
外形寸法	約213 (幅) × 378 (高) × 570 (奥) mm (1流路型・2流路型で、寸法の変更なし)
質量	1ch仕様:約13.5kg 2ch仕様:約15kg



■外形寸法図

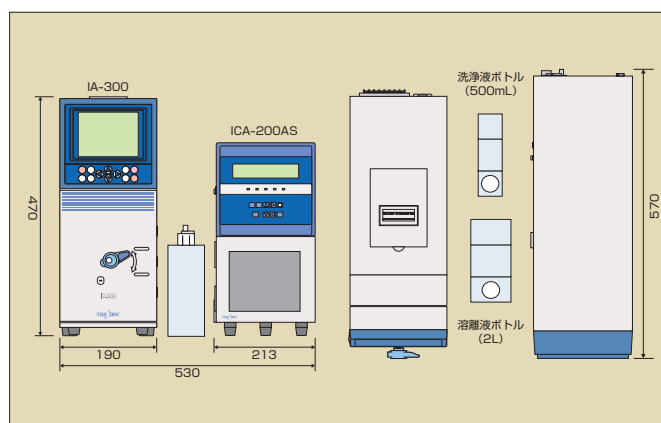

測定データのレポート作成に最適。

レポート作成ソフトキット

6975740K

¥150,000

〔レポート作成ソフト、インタフェースサーバ(TCS-7152)、LANケーブル式〕

■便利な機能

IA-300にメモリー（最大100データ）されているデータを読み込み一覧表を作成します。

測定結果のまとめをスピーディーに！

「測定結果から日報を作る」「測定結果のまとめをする」
このようなときにレポート作成ソフトが有効です。

RS-232端子からインタフェースサーバ(TCS-7152)を介して
LANによる接続が可能です。

測定日時	サンプルNo.	モード	注入量	濃度比率	F	Cl	NO2	Br	NO3	PO4	SO4	サンプル名
2006/2/13 0911	001	PCI-205	20μL	1	5.00 me/L	100 me/L	100 me/L	100 me/L	100 me/L	40.0 me/L	20.0 me/L	標準液
2006/2/13 1000	002	PCI-205	20μL	1	0.001 me/L	215 me/L	9.99 me/L	221 me/L	350 me/L	16.9 me/L	16.0 me/L	試液 A
2006/2/13 1101	003	PCI-205	20μL	1	19.7 me/L	121 me/L	8.41 me/L	123 me/L	271 me/L	5.66 me/L	9.76 me/L	試液 A
2006/2/13 1215	004	PCI-205	20μL	1	21.1 me/L	25.0 me/L	32.4 me/L	26.2 me/L	15.2 me/L	17.7 me/L	20.5 me/L	試液 A
2006/2/13 1245	005	PCI-205	20μL	1	8.19 me/L	231 me/L	23.5 me/L	321 me/L	10.8 me/L	14.6 me/L	23.2 me/L	試液 A
2006/2/13 1400	006	PCI-205	20μL	1	24.2 me/L	5.66 me/L	0.515 me/L	2.56 me/L	1.35 me/L	1.96 me/L	0.05 me/L	試液 A
2006/2/13 1610	007	PCI-205	20μL	1	18.2 me/L	16.9 me/L	13.0 me/L	5.98 me/L	21.2 me/L	23.5 me/L	9.99 me/L	試液 A
2006/2/14 0930	008	PCI-205	20μL	1	31.8 me/L	27.3 me/L	12.8 me/L	231 me/L	411 me/L	19.9 me/L	18.0 me/L	試液 B
2006/2/15 0900	009	PCI-205	20μL	1	22.9 me/L	2.96 me/L	13.0 me/L	27.3 me/L	20.3 me/L	0.530 me/L	12.3 me/L	試液 B
2006/2/16 1000	010	PCI-205	20μL	1	3.59 me/L	18.4 me/L	12.1 me/L	4.91 me/L	26.3 me/L	2.37 me/L	2.81 me/L	試液 B
2006/2/17 1100	011	PCI-205	20μL	1	6.45 me/L	29.4 me/L	18.0 me/L	16.0 me/L	12.3 me/L	3.28 me/L	14.9 me/L	試液 B
2006/2/18 1900	012	PCI-205	20μL	1	1.01 me/L	12.4 me/L	4.02 me/L	31.6 me/L	26.0 me/L	14.2 me/L	18.5 me/L	試液 B
2006/2/19 0900	013	PCI-205	20μL	1	0.692 me/L	31.5 me/L	5.23 me/L	11.4 me/L	24.5 me/L	23.6 me/L	27.3 me/L	試液 B
2006/2/20 1301	014	PCI-205	20μL	1	6.00 me/L	22.9 me/L	1.71 me/L	32.5 me/L	0.999 me/L	5.26 me/L	32.5 me/L	試液 B

一覧表に表示させる測定項目（各イオン種）を任意に選ぶことが可能です。

測定項目毎に上下限値を設定でき、測定結果に「▲」（上限値以上）、「▼」（下限値以下）のマークを付加することが可能です。

任意設定画面

測定結果画面

並べ替え前画面

サンプル名を入力することにより、
測定結果の管理が容易になります。

また、日付・メモリーNo.・

サンプル名で

データの並べ替えができます。

並べ替え後画面

仕様

項目	内容
型名	IA-300
価格	ノンサプレッサ型：¥1,450,000 サプレッサ型：¥1,500,000 *カラム、校正液、溶離液は別売
測定方式	イオンクロマトグラフ法
測定項目	陰イオン（ノンサプレッサ型） PO ₄ 、F、Cl、NO ₂ 、Br、NO ₃ 、SO ₄ 陰イオン（サプレッサ型） F、Cl、NO ₂ 、Br、NO ₃ 、PO ₄ 、SO ₄ 陽イオン1、2価同時 Li、Na、NH ₄ 、K、Mg、Ca 陽イオン1価 Li、Na、NH ₄ 、K 陽イオン2価 Mg、Ca
繰返し性	校正液においてC.V.値2%以内
サンプル注入	手動による試料注入および手動によるバルブ切換え
サンプル計量	ループカット方式 ループ容量20μL または 200μL
測定時間	10～18分/回（測定条件による）
校正	指定校正液による1点校正
カラム恒温槽	40±4℃
データ処理	内蔵
検出部	方式：電気伝導率検出 セル温調：40±4℃
表示	グラフィックLCD
プリンタ	サーマルプリンタ内蔵
使用温度範囲	10～35℃ ただし、急激な温度変化がないこと
出力	アナログ：0～1V デジタル：RS-232C
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大約250VA
外形寸法、質量	約190（幅）×469（高）×530（奥）mm、約18kg

測定範囲

モード	測定イオン種類		20μLループ使用時	200μLループ使用時
PCI-311S	1、2価陽イオン測定	Li	0.050～5.0mg/L	0.005～0.500mg/L
		Na、Mg、NH ₄ (NH ₄ -N)	0.250～25.0mg/L (0.194～19.4mg/L)	0.025～2.50mg/L (0.019～1.94mg/L)
		K、Ca	0.500～50.0mg/L	0.050～5.00mg/L
PCI-322	1、2価陽イオン測定	Li	0.050～10.00mg/L	0.005～1.00mg/L
		Na、Mg、NH ₄ (NH ₄ -N)	0.250～50.0mg/L (0.194～38.8mg/L)	0.025～5.00mg/L (0.019～3.88mg/L)
		K、Ca	0.500～100mg/L	0.050～10.0mg/L
PCI-302S	1価陽イオン測定	Li	0.100～10.0mg/L	0.010～1.00mg/L
		Na、NH ₄ (NH ₄ -N)	0.500～50.0mg/L (0.388～38.8mg/L)	0.050～5.00mg/L (0.039～3.88mg/L)
		K	1.00～100mg/L	0.100～10.0mg/L
PCI-302S	2価陽イオン測定	Mg	0.500～50.0mg/L	0.050～5.00mg/L
		Ca	1.00～100mg/L	0.100～10.0mg/L
PCI-201S	陰イオン測定	F、Cl、Br	1.00～100mg/L	0.100～10.0mg/L
		NO ₂ (NO ₂ -N)	1.00～100mg/L (0.305～30.5mg/L)	0.100～10.0mg/L (0.030～3.05mg/L)
		NO ₃ (NO ₃ -N)	1.00～100mg/L (0.226～22.6mg/L)	0.100～10.0mg/L (0.023～2.26mg/L)
		SO ₄ (SO ₄ -S)	2.00～200mg/L (0.668～66.8mg/L)	0.200～20.0mg/L (0.067～6.68mg/L)
		PO ₄ (PO ₄ -P)	5.00～200mg/L (1.63～65.2mg/L)	0.500～20.0mg/L (0.163～6.52mg/L)
PCI-211	陰イオン測定	F、Cl、Br	0.500～50.0mg/L	0.050～5.00mg/L
		NO ₂ (NO ₂ -N)	0.500～50.0mg/L (0.152～15.2mg/L)	0.050～5.00mg/L (0.015～1.52mg/L)
		NO ₃ (NO ₃ -N)	0.500～50.0mg/L (0.113～11.3mg/L)	0.050～5.00mg/L (0.011～1.13mg/L)
		SO ₄ (SO ₄ -S)	1.00～100mg/L (0.334～33.4mg/L)	0.100～10.0mg/L (0.033～3.34mg/L)
		PO ₄ (PO ₄ -P)	2.50～100mg/L (0.815～32.6mg/L)	0.250～10.0mg/L (0.082～3.26mg/L)
PCI-205	陰イオン測定	F、Cl、Br	0.050～50.0mg/L	
		NO ₂ (NO ₂ -N)	0.050～50.0mg/L (0.015～15.2mg/L)	
		NO ₃ (NO ₃ -N)	0.050～50.0mg/L (0.011～11.3mg/L)	
		SO ₄ (SO ₄ -S)	0.100～100mg/L (0.033～33.4mg/L)	
		PO ₄ (PO ₄ -P)	0.250～100mg/L (0.082～32.6mg/L)	

標準添付品

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| ●1mLディスポーザブルシリンジ | ●プリンタ用紙（2巻） | ●電源コード |
| ●シリンジ針 | ●スパナ（6×8、8×10）（各1） | ●2P変換アダプタ |
| ●サンプリングループ（20、200μL）（各1） | ●六角レンチ（1.5mm、2.5mm、3mm）（各1） | ●アース線 |
| ●エア抜き用シリンジセット | ●プランジャシール交換治具 | ●取扱説明書 |

■測定モード毎の必要部品（別売品）

測定モード	部品		必要項目	数量等	価格
	名称	型名			
陰イオン測定 PCI-205モード サプレッサ	陰イオンカラム	PCI-205	○	1本	¥200,000
	ガードカラム	PCI-205G	○	1本	¥60,000
	ケミカルサプレッサ	6813690K	○	1本	¥200,000
	校正液	20μLループ用 IA-AS1	○	100mL 1本	¥4,000
	溶離液	1L 143H063	○	1本	¥6,000
	除去液	1L 143H071	○	1本	¥5,000
	タンク導入管	6547830K	○	2Lタンク付き	¥10,000
陰イオン測定 PCI-211モード ノンサプレッサ	陰イオンカラム	PCI-211	○	1本	¥200,000
	ガードカラム	PCI-211G	○	1本	¥60,000
	校正液	20μLループ用 IA-AS1	△*1	100mL 1本	¥4,000
		200μLループ用 IA-AS2	△*1	100mL 1本	¥4,000
	溶離液	2L 6547760K	○	1本	¥10,000
		5L 6547770K	△*2	1本	¥15,000
	タンク導入管	6547830K	○	2Lタンク付き	¥10,000
陽イオン測定 PCI-322モード 1,2価同時測定	陽イオンカラム	PCI-322	○	1本	¥200,000
	ガードカラム	PCI-321G	○	1本	¥60,000
	校正液	20μLループ用 IA-CS1	△*1	100mL 1本	¥4,000
		200μLループ用 IA-CS2	△*1	100mL 1本	¥4,000
	溶離液	2L 143H061	○	1本	¥10,000
		5L 143H062	△*2	1本	¥15,000
	タンク導入管	6547830K	○	2Lタンク付き	¥10,000
陽イオン測定 PCI-302Sモード 1価測定	陽イオンカラム	PCI-302S	○	1本	¥150,000
	ガードカラム	PCI-302SG	○	1本	¥50,000
	校正液	20μLループ用 IA-CS1	△*1	100mL 1本	¥4,000
		200μLループ用 IA-CS2	△*1	100mL 1本	¥4,000
	溶離液	2L 6547790K	○	1本	¥10,000
		5L 6547800K	△*2	1本	¥15,000
	タンク導入管	6547830K	○	2Lタンク付き	¥10,000
陽イオン測定 PCI-302Sモード 2価測定	陽イオンカラム	PCI-302S	○	1本	¥150,000
	ガードカラム	PCI-302SG	○	1本	¥50,000
	校正液	20μLループ用 IA-CS1	△*1	100mL 1本	¥4,000
		200μLループ用 IA-CS2	△*1	100mL 1本	¥4,000
	溶離液	2L 6547810K	○	1本	¥10,000
		5L 6547820K	△*2	1本	¥15,000
	タンク導入管	6547830K	○	2Lタンク付き	¥10,000


*1 20μLループ用または200μLループ用のどちらかが必要です。

*2 5Lは補充用になります。

■その他の共通部品


部品		数量等	価格	備考
名称	型名			
プリンタ用紙	PAP-HCS	5巻	¥5,000	感熱紙
オートサンプリCA-200AS接続ケーブル	118B412	1本	¥20,000	IA-300 1台接続用専用ケーブル
オートサンプリCA-200AS接続ケーブル	118B413	1本	¥25,000	IA-300 2台接続用専用ケーブル
レポート作成ソフトキット	6975740K	1式	¥150,000	ソフトウェア、インタフェースサーバ

■外形寸法図（単位：mm）

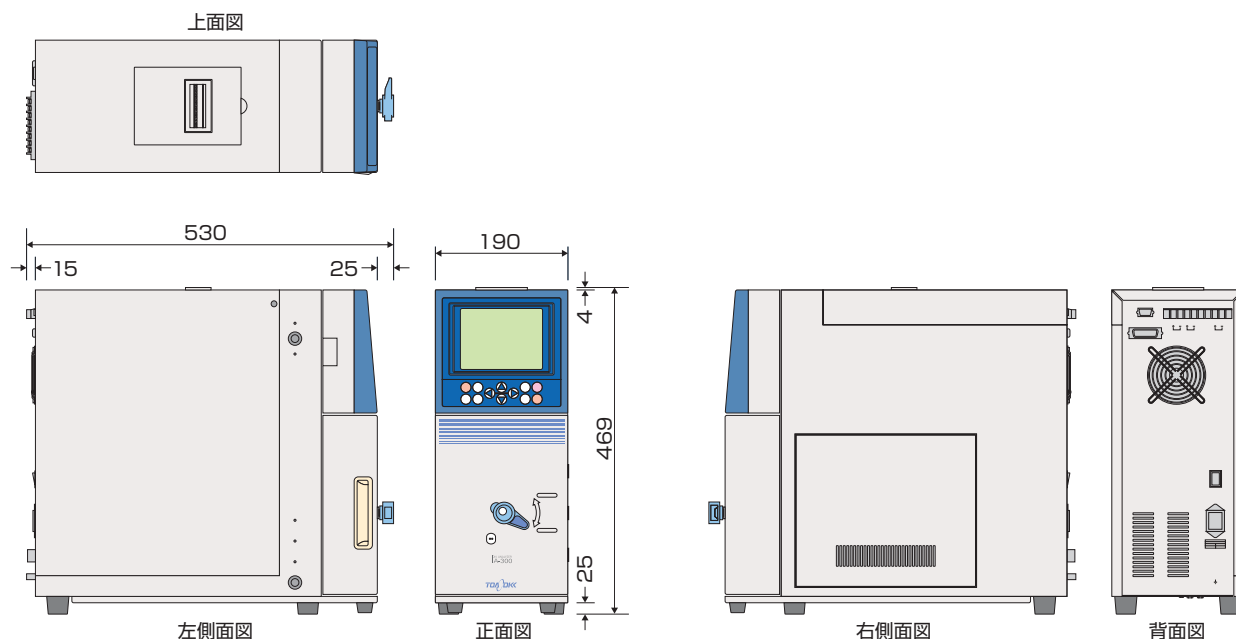

環境や排水、農業、食品、上水、品質管理、教育など
幅広い分野での分析ニーズに
ハイ・レベルのソリューションでお応えします。

《応用分野(例)》

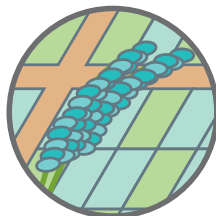

農業

土壌、水耕液、
肥料、家畜飼料、
野菜、茶葉など




排水

工場排水、半導体工
場のフッ素、し尿処理
場放流水、下水など



上水

原水、浄水など

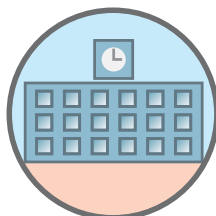


学校

研究、教育などの
支援




分析

依頼分析業務用

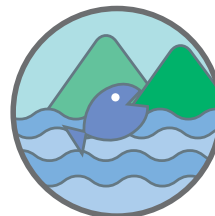


環境

雨水、河川、湖沼、
地下水、土壌、
岩石、海水など

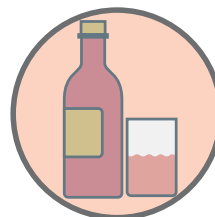


食品

清涼飲料、ジュース、
天然水、酒類、食品、
食品添加物など

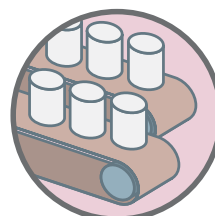

製造

原料、洗浄水、
製品、メッキ液、
処理液など

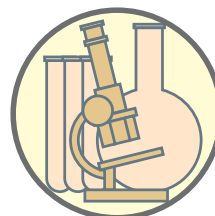

その他

各種研究、
各種品質管理など



▶ 会員制サービスサイトのご案内 ◀

IA-300をご購入後、ユーザ登録をしていただくと下記特典が受けられるようになります。
(すでにIA-300をお持ちの方も登録できます。)

■ 取扱説明書を無料ダウンロード

■ その他関連情報をお知らせいたします。

詳しくは下記の当社ホームページをご覧ください。



東亜ディーケーケー株式会社

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10

TEL.03-3202-0219 FAX.03-3202-5127

e-mail: eigyo@toadkk.co.jp

http://www.toadkk.co.jp/

本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
表示価格には消費税は含まれていません。